

# iX Series Service Setup Guide

[iX Series Service Setup Guide](#)



[Guía de configuración del servicio de la serie iX](#)



[iXシリーズサービスセットアップガイド](#)



[iX系列服務設定指南](#)






**SleepWell App Introduction**

**SleepWell enables patients to self-assess therapy effectiveness upon waking up**

Please confirm that your service provider has sent the invitation to your personal email. If you didn't receive the invitation letter, please contact your service provider or physician.

SleepWell App


1. Self-monitor your treatment progress and outcomes.
2. Access to feedback and resources from physicians.
3. Treatment education center provides guidance and troubleshooting information.

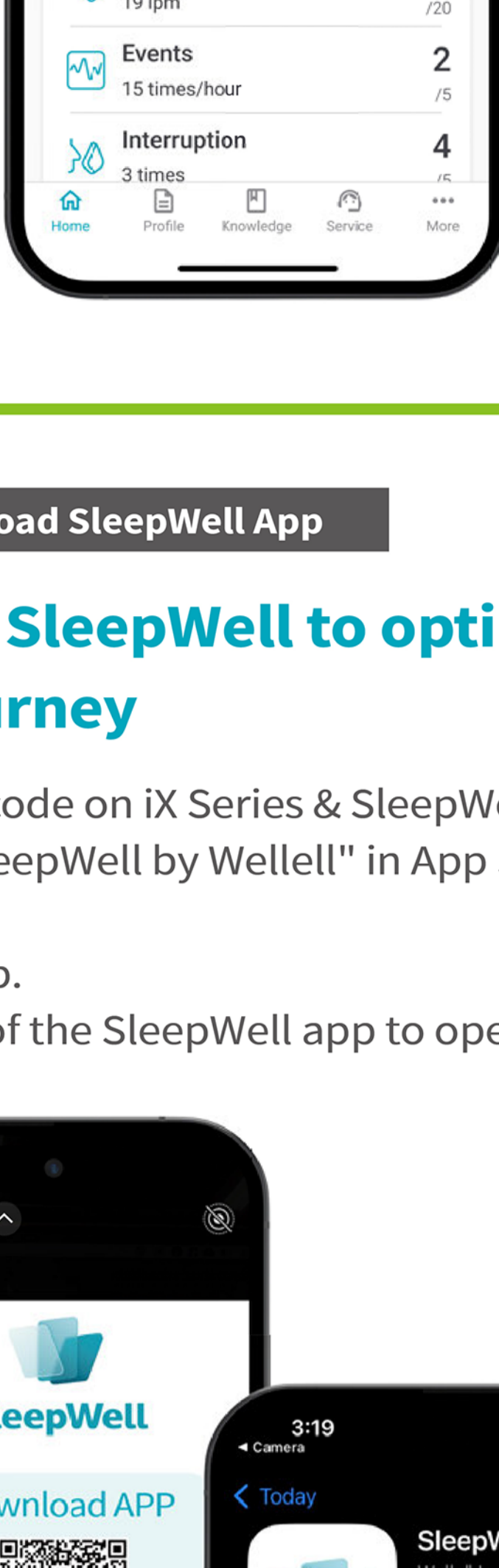

**Steps to Download SleepWell App**

**Download SleepWell to optimize your iX journey**


1. Scan the QR code on iX Series & SleepWell Starter Guide. Or search "SleepWell by Wellell" in App Store or Google Play.
2. Install the app.
3. Tap the icon of the SleepWell app to open the app.

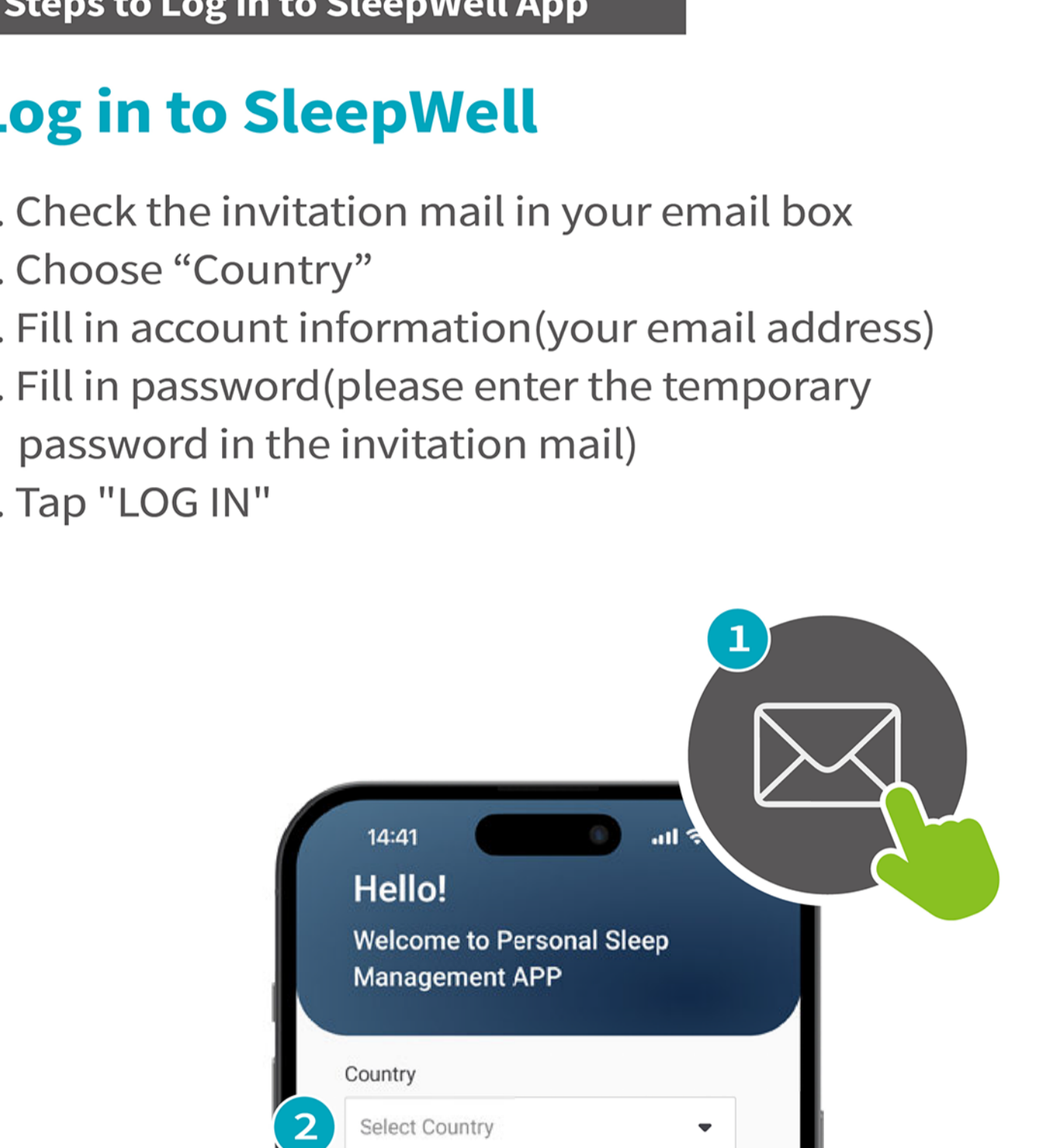

**Steps to Log in to SleepWell App**

**Log in to SleepWell**

1. Check the invitation mail in your email box
2. Choose "Country"
3. Fill in account information(your email address)
4. Fill in password(please enter the temporary password in the invitation mail)
5. Tap "LOG IN"

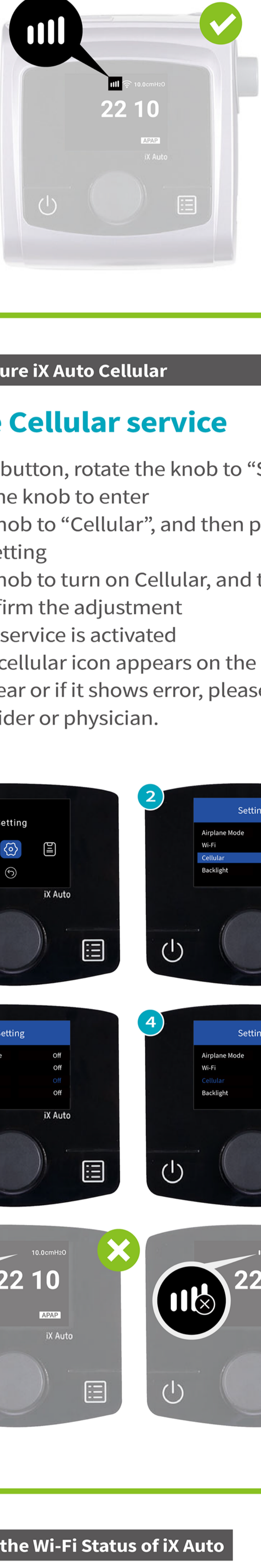


If the log in process fails, please contact your service provider or physician

**How to Check the Cellular Status of iX Auto**

**Upload treatment data via built-in Cellular**


1. Check the Cellular icon on the screen
2. If the icon appears, the Cellular signal is activated
3. If the icon doesn't appear, please follow the steps to configure the Cellular service

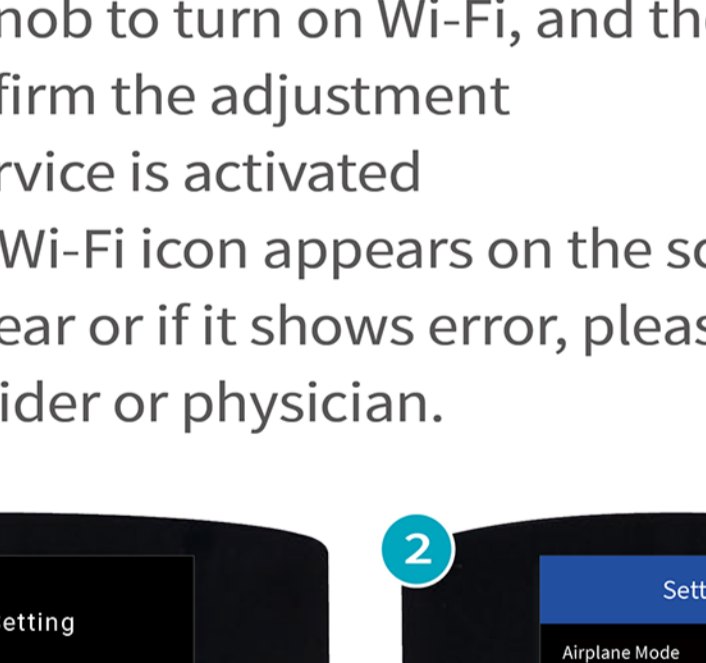

**How to Configure iX Auto Cellular**

**Configure Cellular service**


1. Press MENU button, rotate the knob to "Setting", and then press the knob to enter
2. Rotate the knob to "Cellular", and then press the knob to adjust the setting
3. Rotate the knob to turn on Cellular, and then press the knob to confirm the adjustment
4. The Cellular service is activated
5. Check if the cellular or if it shows error, please contact your service provider or physician.

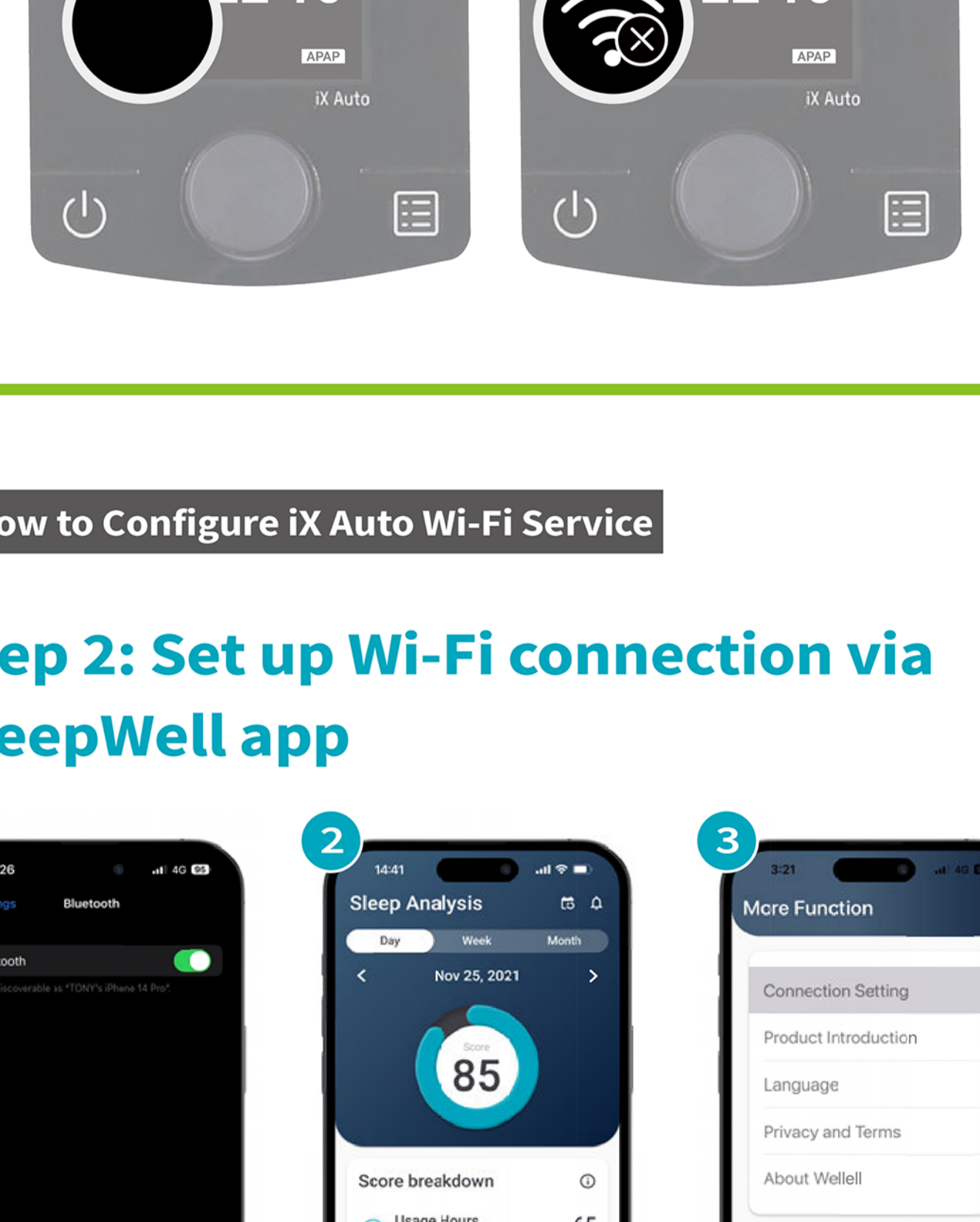

**How to Check the Wi-Fi Status of iX Auto**

**Upload treatment data via Wi-Fi**

1. Check the Wi-Fi icon on the screen
2. If the icon appears, the Wi-Fi signal is activated
3. If the icon doesn't appear, please follow the steps to configure the Wi-Fi service

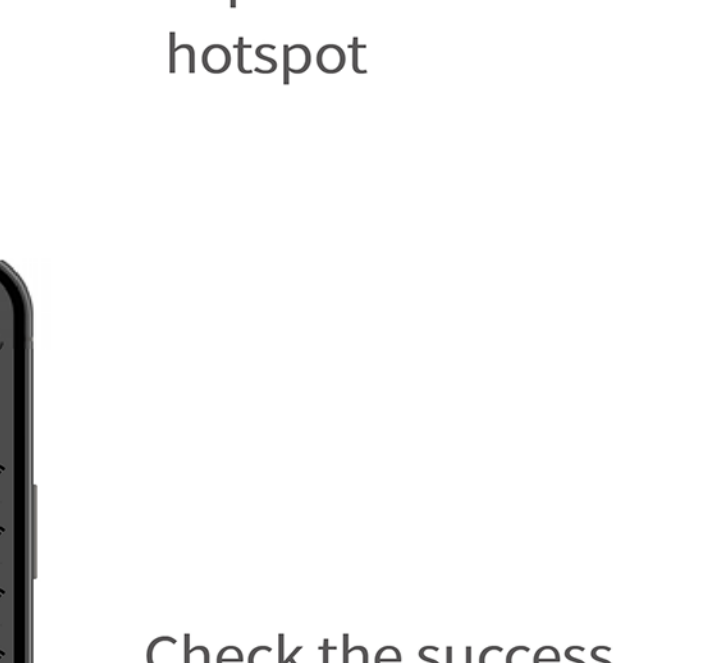

**How to Configure iX Auto Wi-Fi Service**

**Step 1: Turn on Wi-Fi service on iX Auto**

1. Press MENU button, rotate the knob to "Setting", and then press the knob to enter
2. Rotate the knob to "Wi-Fi", and then press the knob to adjust the setting
3. Rotate the knob to turn on Wi-Fi, and then press the knob to confirm the adjustment
4. The Wi-Fi service is activated
5. Check if the Wi-Fi icon appears on the screen. If it doesn't appear or if it shows error, please contact your service provider or physician.



**Step 2: Set up Wi-Fi connection via SleepWell app**

1. Turn on the Bluetooth on mobile phone
2. Enter "SleepWell", tap "More"
3. Tap "Connection setting"



Tap "New connection"



Tap the Wi-Fi hotspot



Enter password



Check the success message on the screen






**Introducción a la aplicación SleepWell**

**SleepWell permite a los pacientes autoevaluar la eficacia de la terapia al despertarse**

Confirme que su proveedor de servicios ha enviado la invitación a su correo electrónico personal. Si no recibió la carta de invitación, comuníquese con su proveedor de servicios o médico.

Aplicación SleepWell

1. Supervise el progreso y los resultados de su tratamiento.
2. Acceda a comentarios y recursos de médicos.
3. El centro de educación sobre el tratamiento brinda orientación e información para la solución de problemas.

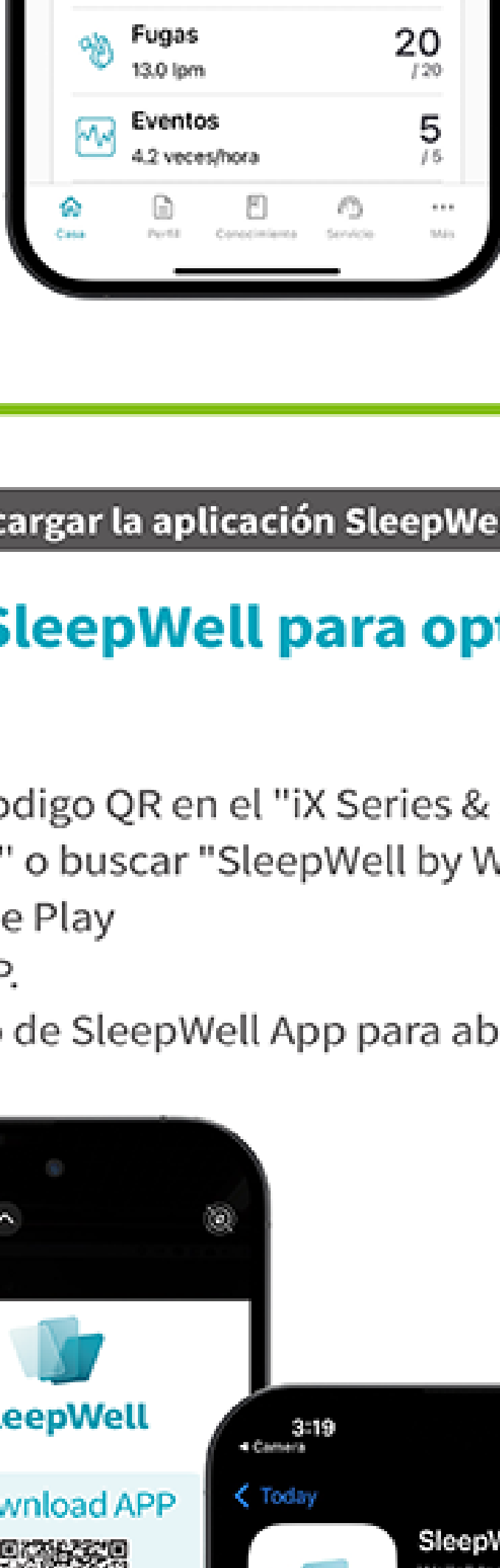

**Pasos para descargar la aplicación SleepWell**

**Descarga SleepWell para optimizar tu viaje iX**

1. Escanear el código QR en el "iX Series & SleepWell Starter Guide" o buscar "SleepWell by Wellell" en App Store o Google Play
2. Instalar la APP.
3. Pulse el icono de SleepWell App para abrir la APP.



**Pasos para iniciar sesión en la aplicación SleepWell**

**Inicie sesión en SleepWell**

1. Revisa el correo de invitación en tu casilla de correo electrónico.
2. Elige "el país".
3. Complete la información de la cuenta (su dirección de correo electrónico).
4. Complete la contraseña (ingrese una contraseña temporal en el correo de invitación).
5. Haga clic en "Iniciar sesión".



Si el proceso de inicio de sesión falla, comuníquese con su proveedor de servicios o médico.

**Pasos para comprobar la conexión de internet del iX Auto**

**Cargar datos de tratamiento a través de internet**

1. Verifique el ícono de conexión de internet en la pantalla del iX Auto.
2. Si aparece el ícono, la conexión de internet está activada.
3. Si el ícono no aparece correctamente, siga los pasos para configurar el servicio de conexión de internet.



**Pasos para configurar la conexión de internet en iX Auto**

**Configurar en la opción servicio "Celular"**

1. Presione el botón MENÚ, gire la perilla a "Configuración", presione la perilla para ingresar
2. Gire la perilla a "Celular", presione la perilla para ajustar la configuración
3. Gire la perilla para encender "Celular", presione la perilla para confirmar el ajuste
4. El servicio "Celular" está activado



**Pasos para comprobar la situación Wi-Fi de iX Auto**

**Cargar datos de tratamiento a través de Wi-Fi**

1. Compruebe el icono de Wi-Fi en la pantalla.
2. Si aparece el icono, la señal Wi-Fi está activada.
3. Si el ícono no aparece correctamente, siga los pasos para configurar el servicio Wi-Fi.



**Pasos para configurar el servicio Wi-Fi de iX Auto**

**Paso 1 : Encender el wifi en el iX Auto**

1. Presione el botón MENÚ, gire la perilla a "Configuración", presione la perilla para ingresar.
2. Gire la perilla a "Wi-Fi", presione la perilla para ajustar la configuración.
3. Gire la perilla para encender Wi-Fi, presione la perilla para confirmar el ajuste.
4. El servicio Wi-Fi está activado.



**Paso 2 : Configurar la conexión Wi-Fi a través de la APP SleepWell**

1. Encienda el Bluetooth en el teléfono móvil
2. Ingrese "SleepWell", haga clic en "Más"
3. Haga clic en "Ajuste de Conexión"



4. Haga clic en "Nueva conexión"
5. Haga clic en el punto de acceso Wi-Fi
6. Introduzca la contraseña



7. Compruebe el mensaje de éxito en la pantalla





## SleepWell アプリの紹介

## SleepWellでは、患者様が起床時に治療効果を自己評価することができます。

代理店あるいは医療機関から患者様のアドレスに招待メールが送信されていることをご確認ください。招待メールが届いていない場合は、代理店担当者または医師にお問合せください。

## SleepWellアプリ

1. 治療の進捗と成果を自己モニタリングする。
2. 医師からのフィードバックや助言にアクセスできる。
3. トラブルシューティングの情報を確認できる。



## SleepWellアプリのダウンロード手順

## SleepWellアプリをダウンロードして、あなたのiX体験を最適化しましょう


1. iXシリーズ&SleepWellスターターガイドのQRコードを読み取ってください。または、App StoreもしくはGoogle Playで「SleepWell by Wellell」を検索してください。
2. アプリをインストールしてください。
3. SleepWellアプリのアイコンをタップし、アプリを起動してください。



## SleepWellアプリへのログイン手順

## SleepWellにログイン

1. メールボックスにある招待メールを確認してください。
2. 「国」を選択してください。
3. メールアドレスを入力してください。
4. 招待メールに書いてある「アプリのログインパスワード」を入力してください。
5. 「ログイン」タップしてください。

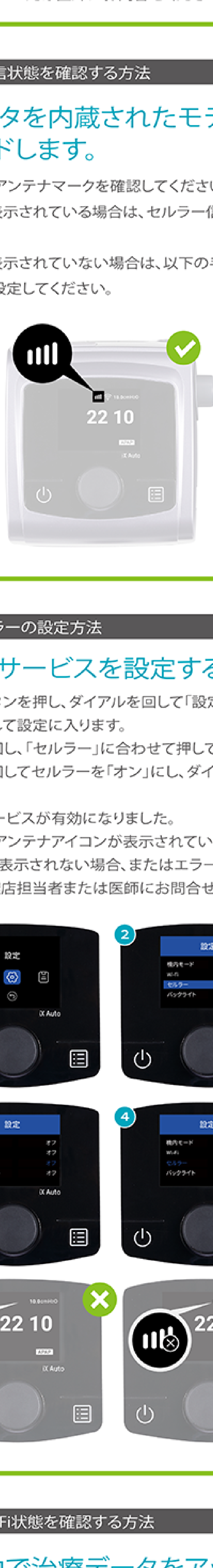


ログインができない場合は、代理店担当者または医師にお問合せください。

## iX Autoの通信状態を確認する方法

## 治療データを内蔵されたモデムでアップロードします。

1. 画面上部のアンテナマークを確認してください。
2. アイコンが表示されている場合は、セルラー信号が有効になっています。
3. アイコンが表示されていない場合は、以下の手順でセルラーサービスを設定してください。

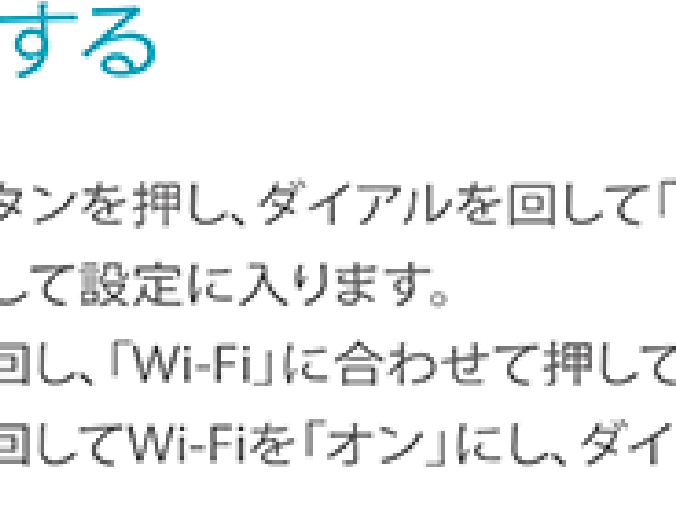

## iX Autoセルラーの設定方法

## セルラーサービスを設定する

1. メニューボタンを押し、ダイヤルを回して「設定」に合わせ、ダイヤルを押して設定に入ります。
2. ダイヤルを回し、「セルラー」に合わせて押しってください。
3. ダイヤルを回してセルラーを「オン」にし、ダイヤルを押して確定します。
4. セルラーサービスが有効になりました。
5. 画面上部にアンテナアイコンが表示されていることを確認してください。表示されない場合、またはエラーが表示される場合は、代理店担当者または医師にお問合せください。



## iX AutoのWi-Fi状態を確認する方法

## Wi-Fi経由で治療データをアップロード

1. 画面上部のWi-Fiアイコンを確認してください。
2. アイコンが表示されている場合は、Wi-Fi信号が有効になっています。
3. アイコンが表示されない場合は、次の手順でWi-Fiサービスを設定してください。



## iX Auto Wi-Fiサービスの設定方法

## ステップ1: iX AutoのWi-Fiサービスをオンにする

1. メニューボタンを押し、ダイヤルを回して「設定」に合わせ、ダイヤルを押して設定に入ります。
2. ダイヤルを回し、「Wi-Fi」に合わせて押しってください。
3. ダイヤルを回してWi-Fiを「オン」にし、ダイヤルを押して確定します。
4. Wi-Fiサービスがオンになりました。
5. 画面上部にWi-Fiアイコンが表示されていることを確認してください。表示されない場合、またはエラーが表示される場合は、代理店担当者または医師にお問合せください。



## ステップ2: SleepWellアプリでWi-Fi接続を設定する

1. スマートフォンのBluetoothをオンにします
2. SleepWellアプリを起動し、「さらに」をタップします
3. 「Wi-Fi接続設定」をタップします
4. 「新しい接続」をタップします
5. 接続するWi-Fiを選択します
6. Wi-Fiパスワードを入力します
7. 接続成功メッセージを確認してください





## 應用程式 SleepWell 介紹

## 使用後立即掌握自身治療效果

經銷商會寄發會員邀請函給您，請至電子信箱收信確認。  
如未收到，請洽經銷商或個管師。

## 應用程式 SleepWell

1. 自我監測治療進度和效果。
2. 取得醫療建議和協助。
3. 知識中心提供健康指南及故障排除指引。



## SleepWell 下載步驟

## 下載 SleepWell，帶來 iX Auto 最佳使用旅程

1. 掃描 iX 系列服務設定指南上的連結，或上 App Store/Google Play 搜尋 "SleepWell by Wellell"。
2. 安裝應用程式。
3. 點選 SleepWell 圖示以開啟應用程式。



## SleepWell 登入步驟

## 登入

1. 請至電郵信箱查看是否收到邀請函。
2. 選擇「國家」。
3. 輸入帳號資訊(電郵地址)。
4. 輸入密碼(請輸入邀請函內的臨時密碼)。
5. 點選「登入」。



若無法登入，請洽經銷商或個管師

## 如何確認 iX Auto 行動網路連線

## 透過內建行動網路上傳使用數據

1. 檢查顯示面板上的行動網路連線圖示。
2. 有行動網路圖示，即代表行動網路連線已啟用。
3. 若無，請依下列步驟設定行動網路連線。



## 如何設定 iX Auto 內建的行動網路連線

## 設定內建行動網路

1. 按主機上的「選單鍵」，旋轉旋鈕至「一般設定」，按下旋鈕進入選單。
2. 旋轉旋鈕至「行動裝置」，按下旋鈕調整設定。
3. 旋轉旋鈕，選擇「行動裝置」，按下旋鈕作確認。
4. 行動網路連線服務已啟用。



## 如何設定 iX Auto 的 Wi-Fi 連線

## 透過 Wi-Fi 連線上傳使用數據

1. 檢查顯示面板上的 Wi-Fi 圖示。
2. 有 Wi-Fi 圖示，即代表 Wi-Fi 連線已啟用。
3. 若無，請依下列步驟設定 Wi-Fi 連線。



## 如何設定 iX Auto 的 Wi-Fi 連線

## 步驟一：在 iX Auto 上開啟 Wi-Fi 服務

1. 按主機上的「選單鍵」，旋轉旋鈕至「設定」，按下旋鈕進入選單。
2. 旋轉旋鈕至「Wi-Fi」，按下旋鈕開始設定。
3. 旋轉旋鈕，啟用 Wi-Fi 連線，按下旋鈕作確認。
4. Wi-Fi 連線已啟用。



## 如何設定 iX Auto 的 Wi-Fi 連線

## 步驟二：透過 SleepWell 設定 Wi-Fi 連線

1. 開啟手機藍牙功能
2. 開啟 SleepWell，點選「更多」
3. 點選「連網設定」
4. 點選「設定新連線」
5. 點選 Wi-Fi 熱點
6. 輸入密碼
7. 查看連線成功訊息

